ООО «ФОТЕК»
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.145а
Почтовый адрес: 620078, Россия, г. Екатеринбург, а/я 84
тел.: +7 (343) 217-63-40 e-mail: fotek@fotek.ru http://www.fotek.ru
ОКПО 41747567 ОГРН 1036603480100 ИНН 6660014314 КПП 667001001

№63456 от 11.06.2026
Информационное письмо
Об обязательном проведении
проверок перед применением

Медицинским организациям, эксплуатирующим
высокочастотные электрохирургические аппараты

Просим обратить внимание, что в руководствах по эксплуатации (РЭ) к поставляемым ООО «ФОТЕК» высокочастотным электрохирургическим аппаратам (системам) имеются указания на необходимость выполнения проверки оборудования перед каждым применением. Инструкция по проверке перед применением приводится в соответствующем разделе РЭ.


Согласно указаниям РЭ должны быть проверены перед использованием высокочастотные электрохирургические инструменты из комплекта аппарата, световая и звуковая индикация подачи высокочастотного тока, световая и звуковая индикация нарушения цепи нейтрального электрода.

Необходимо подчеркнуть, что при проверке световой и звуковой индикации подачи высокочастотного тока, должны быть проверены работоспособность кнопок держателей электродов с кнопками управления и работоспособность клавиш и кнопки (при наличии) педали, с которой предполагается работать.

Отсутствие такой проверки не позволяет выявить неисправные части аппарата (системы) до начала применения, что может привести к проявлению неисправности во время операции и причинению вреда пациенту или к увеличению длительности операции.

Просим выполнять указания РЭ по выполнению проверки составных частей аппарата (системы) перед применением для исключения риска нанесения вреда пациенту.

Директор ООО «ФОТЕК» Александр Владимирович Малеев

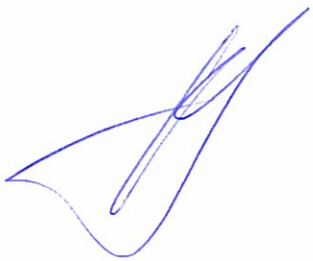

(Подпись)